

Anios'Clean Excel D



Čiščenje in predhodno razkuževanje inštrumentov

Čistilo za predhodno razkuževanje inštrumentov

- Patentiran koncept
- Izvirna kombinacija učinkovin, ki delujejo v sinergiji
- Nejedko, združljivo s široko paleto materialov
- Primerno za ultrazvočno kopel
- Združljivo z robotskimi instrumenti da Vinci




Anios'Clean Excel D

Čistilo za predhodno razkuževanje inštrumentov

Lastnosti proizvoda

- Bistra raztopina modre barve
- pH nerazredčenega proizvoda: najm. 6,5-najv. 7,5
- pH 0,5-odstotne raztopine v vodi iz pipe: 7,4
- pH 0,5-odstotne raztopine v mehki vodi: 7,6
- pH 0,5-odstotne raztopine v demineralizirani vodi: 6,6

Navodila za uporabo

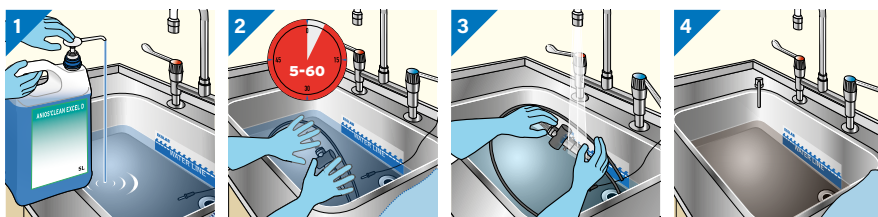

Koncentrirana raztopina. Pred prvo uporabo aktivirajte priložen dozator. Ob ustreznem redčenju se uporablja za namakanje, pri čemer je treba upoštevati minimalni kontaktni čas 5 min.

Medicinski pripomoček v celoti potopite. V kontaktnem času naj bo namakalna kopel pokrita. Skrtačiti mesta, na katerih so vidni madeži.

Obdelane medicinske pripomočke dobro sperite s pitno vodo, da očistite vse sledi proizvoda in organske umazanije.

Za ohranitev učinkovitosti sredstva, raztopino zamenjajte takoj, ko postane vidno umazana in vsaj enkrat na dan.

Mikrobiološke lastnosti

Navedbe/pogoji	Koncentracija	Kontaktni čas
Baktericid* skladno z EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Levurocid* skladno z EN 13624/EN 14562	0,5%	15 min
Tuberkulocid* skladno z EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Deluje na viruse z ovojnico po EN 14476/EN 17111	0,5%	15 min
Deluje na poliomavirus SV40* po EN 14476/EN 17111	2%	60 min

*=umazani pogoji

Podatki o pakiranju in naročanju

Proizvod	Prodajna enota	Šifra naročanja
Anios'Clean Excel D	12 x 1 L plastenka	3113130



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuirar:

ECOLAB D.O.O.
Vajngerlova 4
2000 Maribor
Slovenia

ECOLAB GmbH
(REG. HOLDER FOR: A, BG, CZ, HR, HU, RO,
SK, SLO NOSITELJ ODOBRENJA ZA HR)
Rivergate
Handelskai 92
1200 Wien, Österreich

Področje uporabe

Čiščenje in razkuževanje medicinskih pripomočkov: kirurški in medicinski inštrumenti, temperaturno občutljivi inštrumenti in oprema za endoskopijo pred sterilizacijo.

Navodila za uporabo

- Koncentrirana raztopina. Pred prvo uporabo aktivirajte priložen dozator. Ob ustreznem redčenju se uporablja za namakanje, pri čemer je treba upoštevati minimalni kontaktni čas 5 min.
- Medicinski pripomoček v celoti potopite. V kontaktnem času naj bo namakalna kopel pokrita. Skrtačiti mesta, na katerih so vidni madeži.
- Obdelane medicinske pripomočke dobro sperite s pitno vodo, da očistite vse sledi proizvoda in organske umazanije.
- Za ohranitev učinkovitosti sredstva, raztopino zamenjajte takoj, ko postane vidno umazana in vsaj enkrat na dan.

Sestava

Didecildimetilamonijev klorid, klorheksidin diglukonat, neionske površinsko aktivne snovi, parfum, barvilo, pomožne snovi.

Skladiščenje

Nevarno: upoštevajte navodila za uporabo (pripravljena skladno z veljavnimi evropskimi predpisi glede razvrščanja in označevanja kemikalij). Skladiščiti: od +5 do +25°C.

Certifikati

Medicinski pripomoček. Podatki o popolni antimikrobni učinkovitosti proizvoda Anios'Clean Excel D so vključeni v znanstveni dosje, ki je na voljo na zahtevo.

Medicinski pripomoček uporabljajte varno

Vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.



SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™